

印刷需谨慎

1. 仔细校对PDF文档与在线H5版本内容和细节是否一致；
2. 仔细校对文字或段落是否显示完整（当文本框尺寸过小时，段落可能会显示不完整）；
3. 仔细校对图片是否缺失（当图片库内原图被删除后，对应图片将会空白）；
4. 仔细校对字体（某些冷门字体可能会有文字不全的情况，导致字体显示异常）；
5. 仔细校对颜色（使用形状、透明度、遮罩、滤镜、描边等先进功能导出的PDF，在某些阅读器内不支持，可能导致偏色或错位等，请以**最新版谷歌浏览器**打开PDF，以谷歌浏览器显示为标准进行校对）；
6. H5在线版可能会因为浏览器不同，而导致显示有差异，请使用最新版的谷歌浏览器作为标准进行校对；
7. 请充分做好印前处理工作，本PDF为较高版本PDF，印前除了文字转曲工作外，还需对文件进行拼合、栅格化图形、转换为低版本PDF等（某些印刷机系统软件陈旧，不支持形状、遮罩、阴影、滤镜、描边等高级功能，需要先进行拼合处理或版本转换处理）；
8. 本PDF颜色模式为RGB，不支持RGB颜色的印刷机，请把PDF转换为CMYK颜色模式；
9. 印前PDF文件处理后，应再次校对（某些转曲软件、拼合软件可能会出现处理异常）；
10. 印前请先删除本页；
11. 印前校对无误后，先打样一本，再次进行校对；

声明：非FLBOOK平台内印刷的作品，与其他第三方印刷厂商产生的纠纷与FLBOOK平台无关，由于未仔细校对或未做好印前处理所产生的一切印刷问题与FLBOOK平台无关，与本PDF文件无关。

E²防近视雷达

使用指南 v1.0



适合 3~16岁儿童 使用

兰光·近控

E防近视雷达操作简表

开关

开机  关机
(大于3秒)

唤醒  睡眠
(约1秒)

闪烁次数

阅读距离

绿灯

距离提示

1
2
3
4
5
6

佳
良
一般
近 (慢3声)
很近 (中3声)
非常近 (快3声)

闪烁次数

阅读光照

橙灯

光照提示

1
2
3
4
5
6

佳
良
一般
差
很差
非常差

闪烁

电池状态

红灯

电池指示

快闪(1秒/次)
慢闪(5秒/次)
长亮(1分钟)

充电中
电量低
刚充满电

喇叭

开关机提示

头戴感知提示

距离提示

阅读时长提示

周期选项

选设方法

阅读周期

30分钟
45分钟
(默认)
60分钟

- 点按开关5次 设备进入周期设置模式
- 绿灯开始循环闪烁

慢闪 30分钟	中闪 45分钟	快闪 60分钟
------------	------------	------------
- 在相应闪烁期间点按开关1次即可选定阅读周期

阶段评价

最近1小时
过去10小时

阅读距离

阅读光照

绿灯第1闪烁

橙灯第1闪烁

绿灯第2闪烁

橙灯第2闪烁

阶段评价情况在非头戴状态时循环指示
闪烁次数的意义同前

■ 开机



短按 睡眠 ◀▶ 工作

长按 开机 ◀▶ 关机

长按：大于3秒

如何头戴

额头中央



耳上3厘米

头戴感知



阅读距离

绿色闪烁 指示距离



距离等级	闪烁次数
佳	1
良	2
一般	3
近	4
很近	5
非常近	6



头戴状态

距离等级	声音警示
佳	——
良	——
一般	——
近	慢4声
很近	中4声
非常近	快4声

距离过近时有声音警示 

阅读光照度

头戴状态

橙色闪烁 指示光照




阅读微环境亮度&室内照度

亮度等级	闪烁次数
佳	1
良	2
一般	3
差	4
很差	5
非常差	6

注：阅读微环境亮度——阅读桌面等阅读小环境的亮度

室内照度测量

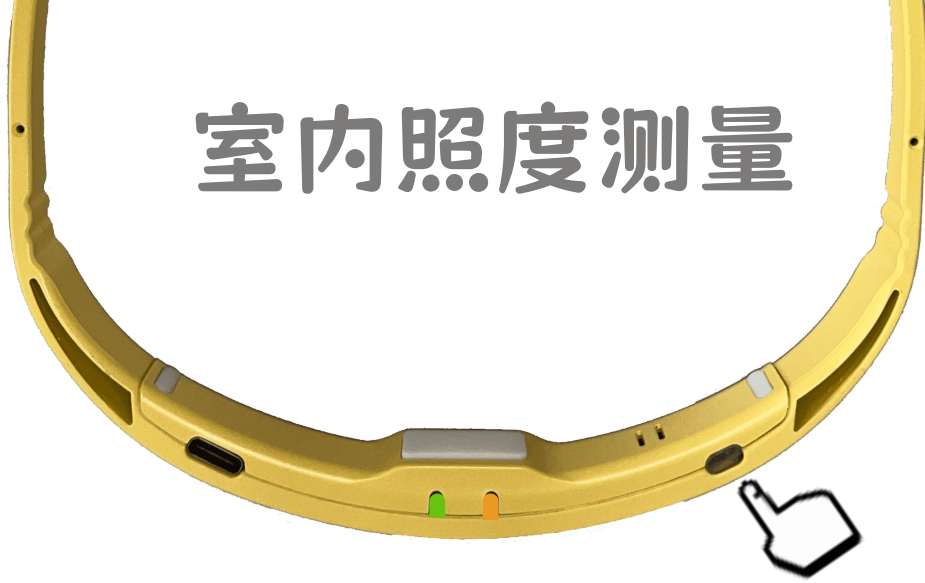

点按开关**3次**：设备进入**照度仪模式**

状态：绿灯常亮，橙灯以6秒为一个周期闪烁
(照度仪模式下，按动1次开关，则退出照度仪模式)

亮度等级	闪烁次数
佳	1
良	2
一般	3
差	4
很差	5
非常差	6

照度指示：E²雷达6秒为一个测量周期，以橙灯闪烁次数，指示当前照度

阅读时间提醒



学龄前

30分钟



小学生

45分钟

默认



初中生

1小时

★阅读周期，选设方法如下

- 点按开关5次 设备将进入阅读周期设置模式
- 绿灯开始循环闪烁


慢闪	中闪	快闪
30分钟	45分钟	1小时

- 在相应闪烁期间点按开关1次即可选定对应阅读周期

历史表现

橙 灯

先提示当前1小时内阅读光照

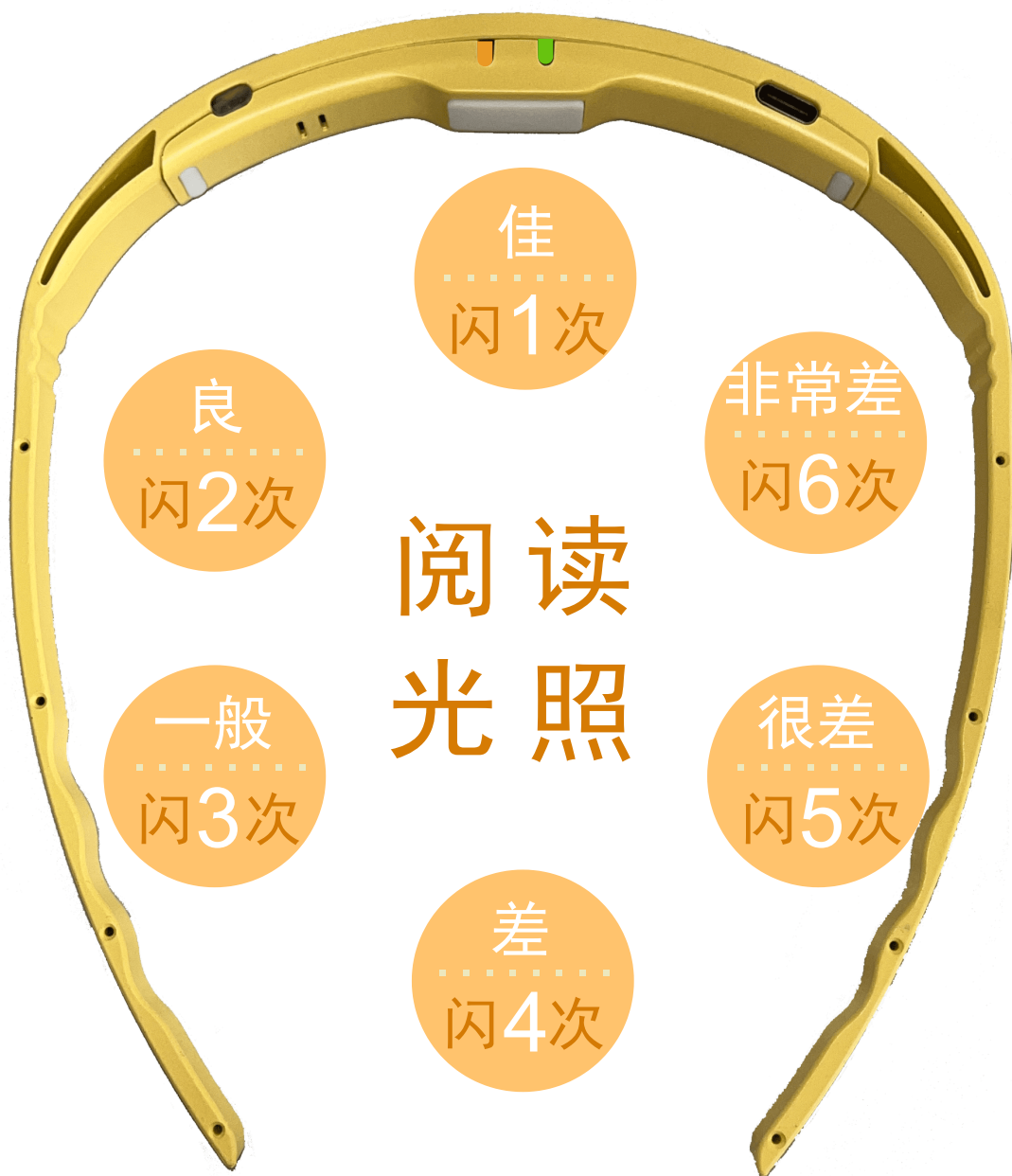

再提示最近累计10小时的阅读光照

绿灯

示例：

先闪1次

说明当前距离佳

提示当前1小时内阅读距离



再提示最近累计10小时的阅读距离

电池



USB充电口

一周充电**1次**
续航**30小时**


红色快闪 ● **充电中**

红色慢闪 ● **电量低**


红色长亮 ● **充满电**

(刚充满 电池将长亮1分钟)

产品图解

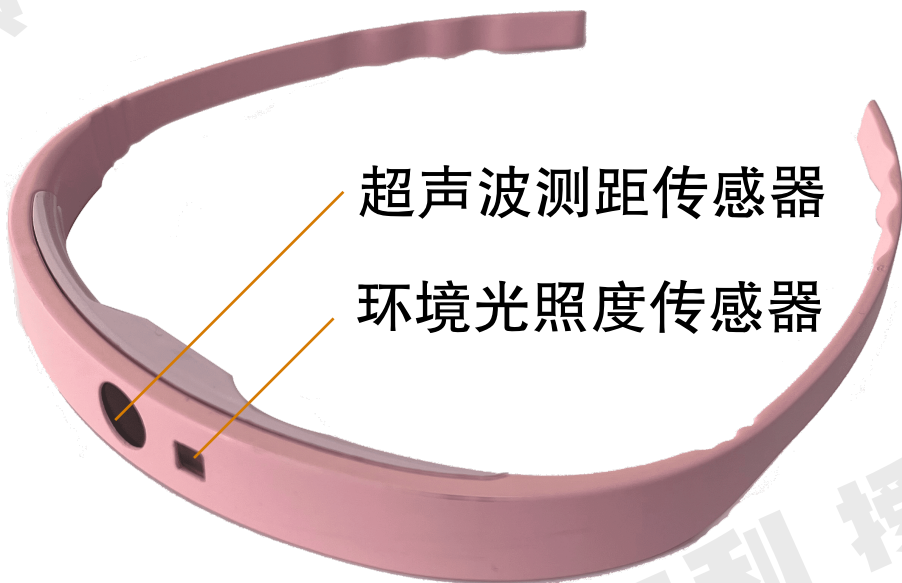

22克

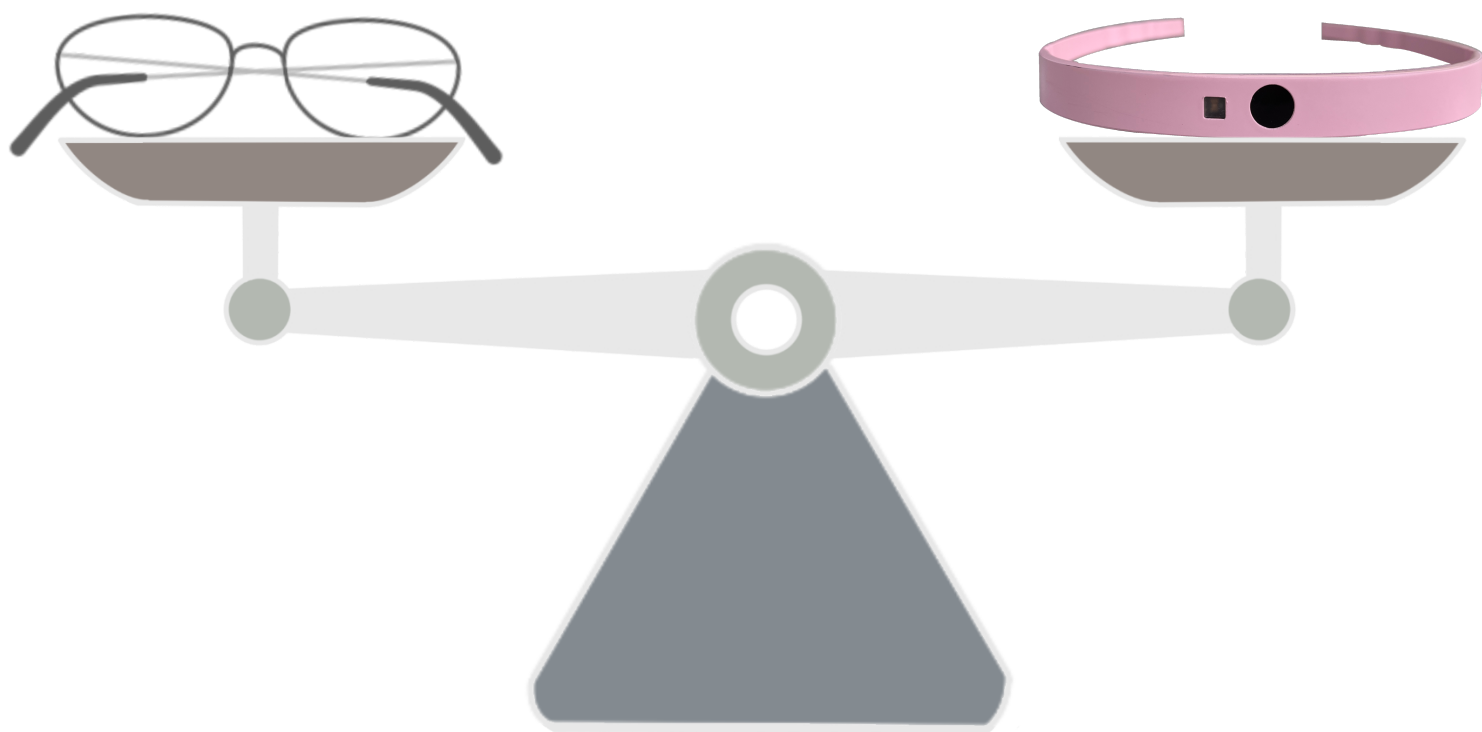

重量 = 1副眼镜

我这样防近视

拥有 E²雷达 助你做到

距离佳

照度良

时间有度

阻止近视的**发生**和**加深**

孩子们还会认知到

什么样的



阅读距离

阅读光照

阅读时间

更有益于近视预防

久而久之

孩子们更会养成




科学的

用眼习惯



习惯成自然

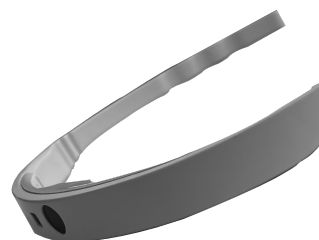

没有E²雷达的日子里

习惯就是预防近视的最佳助手

美丽未来

值得拥有





公众号：兰光近控



兰光数字通讯设备有限公司
江苏·常州